

特殊寝台付属品・マットレス


NEW アルファプラ すくっとRe (タイカ)

厚さ 8.0 cm
硬さの異なるウレタンフォームを組み合わせることにより、寝返りや起き上がりをはじめとするベッド上での動きをサポートします。



91cm幅	TS-SKT-ReA1R	91cm幅	mini	TS-SKT-ReA1S
TAIS/JANコード	00563-000108	TAIS/JANコード	00563-000109	
83cm幅	TS-SKT-ReA3R	83cm幅	mini	TS-SKT-ReA3S
TAIS/JANコード	00563-000106	TAIS/JANコード	00563-000107	
非課税				
月額料金				
1割				
2割				

メリー&ハリー (ケーブ) 柔らかめサイドと硬めサイド、どちらも心地よいリバーシブルマットレス。

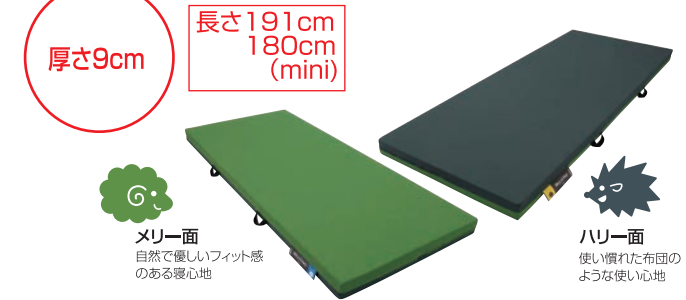

厚さ9cm	長さ191cm 180cm (mini)	91cm幅	CR-681	91cm幅	mini	CR-682
		83cm幅	CR-680			
リバーシブル						
TAIS/JANコード 00206-000079						
非課税						
月額料金						
1割						
2割						


マルチマットレス (ライフジャパン)

無膜ウレタンにより通気性に優れています。制菌加工・難熱加工により安心して使用して頂けます。




厚さ10.0cm	長さ191cm	91cm幅	AK01-91R
		TAIS/JANコード	01489-000005
非課税			
月額料金			
1割			
2割			

NEW エバーフィット C3 (パラマウント) 通気タイプ

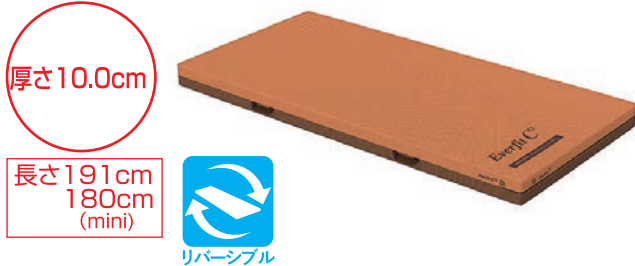

厚さ10.0cm	長さ191cm 180cm (mini)	91cm幅	KE-611TQ	91cm幅	mini	KE-612TQ
		TAIS/JANコード	00170-001042	TAIS/JANコード	00170-001043	
		83cm幅	KE-613TQ	83cm幅	mini	KE-614TQ
		TAIS/JANコード	00170-001044	TAIS/JANコード	00170-001045	
リバーシブル						
非課税						
月額料金						
1割						
2割						


ソフィア (モルテン) 長時間維持する体圧分散性能と2つの寝心地を選べるリバーシブル構造マットレス

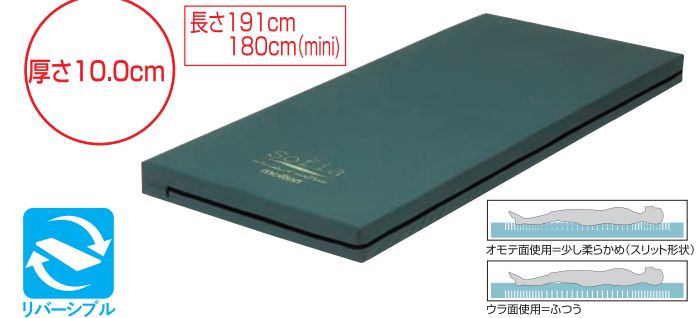

厚さ10.0cm	長さ191cm 180cm (mini)	91cm幅	MHA1091A	91cm幅	mini	MHA1091SA
		TAIS/JANコード	00054-000308	TAIS/JANコード	00054-000309	
		83cm幅	MHA1083A	83cm幅	mini	MHA1083SA
		TAIS/JANコード	00054-000306	TAIS/JANコード	00054-000307	
リバーシブル						
非課税						
月額料金						
1割						
2割						


NEW ベイシスサポートマットレス (プラッツ) (91cm 幅) 通気タイプ

厚さ 8.0 cm
ウレタンによるやわらかさと、寝返りしやすい適度な硬さを両立した、ショート・レギュラー・ロングに対応できるマットレス

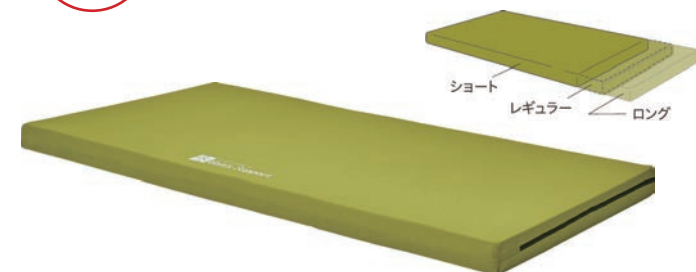

厚さ8.0cm	91cm幅	PM14-A9008L
	TAIS/JANコード	00631-000596
非課税		
月額料金		
1割		
2割		

床ずれ防止用具選定のめやす

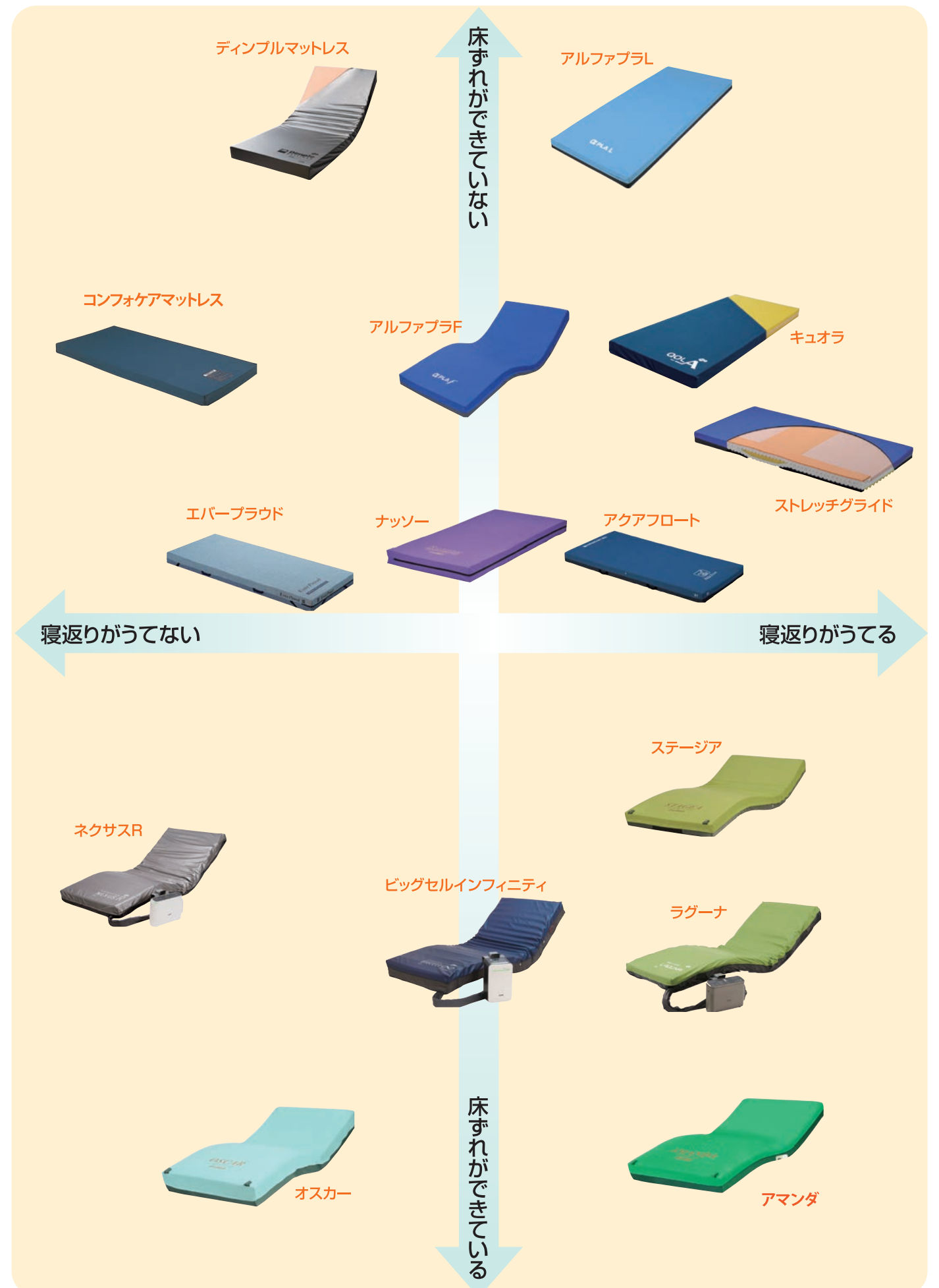

「めやす」はメーカーカタログや実物による試験などを元に総合的に判断したものです。商品の優劣を示すものではありませんのでご注意ください。

床ずれ防止用具

静止型マットレス

コンフォケアマットレス(パラマウントベッド)

性質の異なるウレタンフォームの組み合わせで、体圧分散性と高支持性を両立。

厚さ 8.5cm
長さ 191cm

- カバー ナイロン
- クッション材 低反発ウレタンフォーム
高弾圧ウレタンフォーム

91cm幅 KE-811

TAIS/JANコード 00170-000257

83cm幅 KE-813

TAIS/JANコード 00170-000258

課税

月額料金	
1割	2割

静止型マットレス

アルファブラL(タイカ)

厚さ 10.0cm
長さ 195cm

体圧分散と動きやすさのバランスが特徴。
あなたを床ずれから守ってくれる最初のマットレス。

- カバー ポリエステル
- クッション材 シリコーンゲル
ポリウレタンフォーム

91cm幅 MB-LW1R

TAIS/JANコード 00563-000103

83cm幅 MB-LW3R

TAIS/JANコード 00563-000101

課税

月額料金	
1割	2割

静止型マットレス

キュオラ(ケーブ)

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性
療養者のQOLの向上が可能です。

厚さ 10cm
長さ 191cm
180cm(mini)

90cm幅 CR-591

TAIS/JANコード 00206-000077

83cm幅 CR-590

TAIS/JANコード 00206-000077

90cm幅 mini CR-593

TAIS/JANコード 00206-000077

83cm幅 mini CR-592

TAIS/JANコード 00206-000077

課税

月額料金	
1割	2割

静止型マットレス

ディンプルマットレス(ケーブ)

ウレタンフォーム特有の反力を軽減し快適な寝心地も両立

厚さ 12.0cm
長さ 191cm
180cm(mini)

- 変形することでウレタンの反力を抑えるディンプル(くぼみ)+スリット構造
- 端座位の安定と離床をサポートする厚さ12cmの3層構造



90cm幅 CR-541

TAIS/JANコード 00206-000070

83cm幅 CR-540

TAIS/JANコード 00206-000070

90cm幅 mini CR-543

TAIS/JANコード 00206-000070

83cm幅 mini CR-542

TAIS/JANコード 00206-000070

課税

月額料金	
1割	2割


床ずれ防止用具

静止型マットレス

アクアフロートマットレス通気タイプ(パラマウントベッド)

臀部にかかる負担を水のちからで軽減。
12cmの薄さで優れた体圧分散性能を実現。

厚さ 12.0cm
長さ 191cm
180cm(mini)

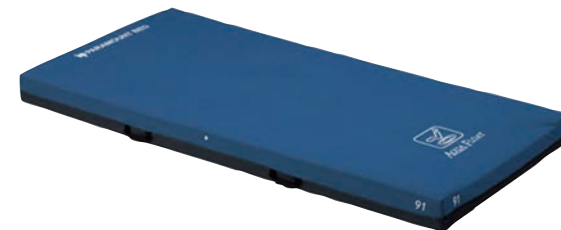

ベッド背上げ時にマットレス中央に配置されたアクアセルが臀部をやさしく包み込み、すぐれた体圧分散効果を発揮。

91cm幅 KE-841Q

TAIS/JANコード 00170-000507

83cm幅 KE-843Q

TAIS/JANコード 00170-000508

91cm幅 mini KE-8411Q

TAIS/JANコード 00170-000511

83cm幅 mini KE-8431Q

TAIS/JANコード 00170-000512

課税


月額料金	
1割	2割

静止型マットレス

ストレッチグライドマットレス(パラマウントベッド)

性質の異なるウレタンフォームを2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮。

厚さ 12.5cm
長さ 191cm
180cm(mini)

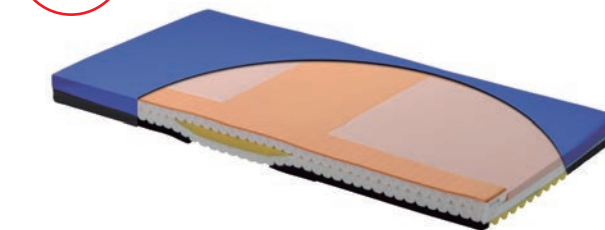

91cm幅 KE-791TQ

TAIS/JANコード 00170-000725

83cm幅 KE-793TQ

TAIS/JANコード 00170-000727

91cm幅 mini KE-792TQ

TAIS/JANコード 00170-000726

83cm幅 mini KE-794TQ

TAIS/JANコード 00170-000728

課税

月額料金	
1割	2割

静止型マットレス

ナッソー(モルテン)

長時間維持する優れた体圧分散性能と
ベッド背上げ時の苦しさを解決したマットレス

厚さ 13.0cm

長さ 196cm



- カバー ウレタン合皮(防水仕様)
- クッション材 ウレタンフォーム


3層式高密度ウレタンフォーム

かたさの異なる高密度ウレタンフォームを3層構造にすることで、各種体位での優れた体圧分散性能と端座位やベッド背上げ時の座位の安定感を向上しています。

上部層 超やわらかめ／高密度高反発系ウレタンフォーム
中間層 少しかため／高密度中反発系ウレタンフォーム
下部層 やわらかめ／高密度中反発系ウレタンフォーム

3層式スライド構造

3層構造のウレタンフォームがベッド背上げの動きに合わせてスライドし、背上げ時に背中にかかる苦しみの原因となる頭側から押さえ込む力を吸収。ベッド背上げ時の楽な姿勢を確保します。

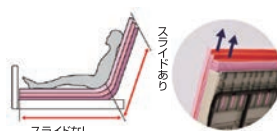

91cm幅 MNS91

TAIS/JANコード 00054-000091

83cm幅 MNS83

TAIS/JANコード 00054-000091

課税

月額料金	
1割	2割

静止型マットレス

アルファプラF(タイカ)

4×4スリット加工によりマットレスがぴったりフィット。
体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応。

厚さ 13cm

長さ 195cm
181cm(mini)



- 柔らかく、動きやすい。アルファプラでおなじみのアルファゲルと、高弾性無膜ウレタンフォームによる優れた体圧分散性と寝心地を実現。
- 4×4スリットにより体圧分散しながら体にフィット。
- 新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く拡散し、暑さを軽減。

91cm幅 MB-FW1R

TAIS/JANコード 00563-000059

83cm幅 MB-FW3R

TAIS/JANコード 00563-000056

91cm幅 mini MB-FW1S

TAIS/JANコード 00563-000058

83cm幅 mini MB-FW3S

TAIS/JANコード 00563-000055

課税

月額料金	
1割	2割

床ずれ防止用具

静止型マットレス


エバークラウドマットレス通気タイプ (パラマントベッド)

静止型で最高レベルの体圧分散性に加えて、
床ずれの発生要因である「ずれ」や「蒸れ」も軽減

5層構造が静止型最高クラスの体圧分散性を発揮

床ずれリスクやADLに応じて、使い分けが出来るリバーシブル構造。EXソフト面はエアマットレスと同等の静止型最高レベルの体圧分散性を発揮。ソフト面は反発性を高めて、体圧分散性能と動きやすさを両立しています。

●EXソフト面 ●ソフト面 ●エアマットレス

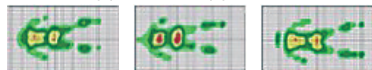

グライドシートが滑って背上げ時の「ずれ」を軽減

グライドシートが背部や踵部にかかるずれ力を低減。逆に臀部は身体のすり落ちを防ぎます。



厚さ
13.0cm

長さ191m 91cm幅 KE-621TQ

TAIS/JANコード 00170-000962

83cm幅 KE-623TQ

TAIS/JANコード 00170-000964

課税	月額料金	
1割		2割

ベッドパッド

床ずれナースパッド(FITパシフィック)


オーバーレイタイプ

厚さ
2cm

長さ195cm

夏涼しくて冬暖かい。
床ずれ防止用具のお供に。

立体格子構造が空気の層を保ち体圧も分散。

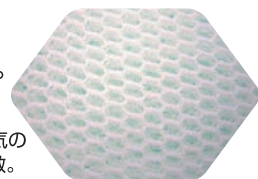

91cm幅 TN-1100P/91

TAIS/JANコード 00762-000010

83cm幅 TN-1100P/83

TAIS/JANコード 00762-000001

課税	月額料金	
1割		2割

※エアマットレス、静止型マットレスの上に敷いてご利用ください。

ベッドパッド

ブレイラプラスベッドパッド(G・REST)

オーバーレイタイプ

防水マットレスに通気性をプラス
エアマットレスに除湿性をプラス
硬めのマットレスに体圧分散性をプラス



厚さ
1.5cm

長さ195cm
183cm(mini)

※マットレスの上に敷いてご利用ください

91cm幅 BRPS-910R 91cm幅 mini BRPS-910S

TAIS/JANコード 01149-000012

TAIS/JANコード 01149-000013

83cm幅 BRPS-830R

TAIS/JANコード 01149-000011

課税	月額料金	
1割		2割

床ずれ防止用具

エアーマットレス

ネクサスR(ケーブル)

高機能エアマットレス

背上げ角度（15. 30. 45. 60）の4段階内圧を調整

厚さ
12.0cm

長さ191cm



91cm幅 CR-663

TAIS/JANコード 00206-000083

83cm幅 CR-660

TAIS/JANコード 00206-000082

課税	月額料金	
1割		2割

ハイブリッドタイプ

ステージA(モルテン)

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策した
高機能エアマットレス

厚さ
13.0cm

長さ193cm
182cm(mini)



■マイクロエアセル+連動したフィッティング層=底着き防止層により、体圧分散能と除圧性能および寝心地のよさと寝返りのしやすさを向上しています。

体圧分散性能	除圧性能	寝心地
座位安定性	むれ対策	ひえ対策

■体圧分散式マットレスに求められる6つの特性を備えています。

91cm幅 MSTA91

83cm幅 MSTA83

91cm幅 mini MSTA91S

83cm幅 mini MSTA83S

TAIS/JANコード 00054-000115

課税	月額料金	
1割		2割

ハイブリッドタイプ・エアーマットレス

オスカー(モルテン)


さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス

厚さ
17.0cm


長さ193cm
182cm(mini)



ポンプ内蔵式で場所をとらない構造。

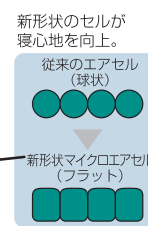

4つのポジショニングセル

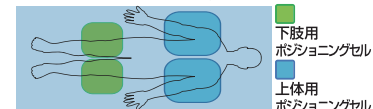

自動体位変換機能



<ハイブリッドタイプ>

91cm幅 MOSC91 91cm幅 mini MOSC91S

83cm幅 MOSC83 83cm幅 mini MOSC83S

TAIS/JANコード 00054-000137

<エアタイプ>

91cm幅 MOSC91A 91cm幅 mini MOSC91SA

83cm幅 MOSC83A 83cm幅 mini MOSC83SA

TAIS/JANコード 00054-000139

課税	月額料金	
1割		2割

床ずれ防止用具

エアーマットレス

NEW アマダ (モルテン) 「3D 除圧」と「お知らせ機能」で安全・安心を追求した高性能エアマットレス


厚さ 14.0cm
長さ: 193cm【レギュラー】
182cm【ショート】

NEW 3D 除圧
お知らせ機能



危険1

長時間、圧(圧迫力やずれ力)がかかることに苦しさや床ずれの発生

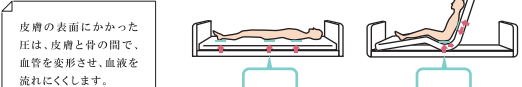

長時間圧がかかると、痛みやしびれ、苦しさを感じ、さらに圧がかかると、床ずれが発生(悪化)します。
長時間の圧を除くこと(＝除圧)が重要です。

解決

『3D 除圧』により除圧性能を大幅に向上させ、圧を劇的に軽減し、究極の床ずれ対策を実現します。

次元1 たて除圧
次元2 よこ除圧
次元3 傾き除圧

危険2

ご家族に連絡ができず、利用者様に危険な状態が発生



重大事故や重症化にもつながるおそれがあり、利用者様の变化に早く気づいて対応することが重要です。

解決

『お知らせ機能』により、利用者様の变化をワイヤレス受信機がチャイムでお知らせするため、ご家族が寝ている時や、日中ベッドの近くで利用者様の様子を確認できない時も安心いただけます。



91cm幅 MAMA91

TAIS/JANコード 00054-000436

83cm幅 MAMA83

TAIS/JANコード 00054-000435

課税

月額料金	
1割	2割

【素材】○マット部：マイクロエアセル＝ウレタンフォーム
フタ部：底着き防止層＝高耐久ウレタンフォーム
○カバー部：ウレタン合皮(制菌加工)

エアーマットレス

エアマスタービッグセルインフィニティ (ケープ)

厚さ 17.0cm
長さ 191cm
180cm (mini)



背上げ対応
自動ヘッドアップ
対応機能

- 角度に応じた内圧に自動調整し底づきを防止。
- 経管栄養・PEGなど30°以上の長時間の背上げに対応



自動化により、設定・解除のし忘れがありません



拘縮対応モード

- 安定保持と局所圧を分散



微波動モード

- 安静管理が必要な方や
- 圧切替が気になる方に

クイックハード

- 清拭やおむつ交換時など
- 安定床面確保

停電対策
「マット内圧
約14日間保持」

停電時、特殊なバルブが自動的にエア抜けを防止します。



91cm幅 CR-555

83cm幅 CR-550

91cm幅 mini CR-557

83cm幅 mini CR-553


TAIS/JANコード 00206-000074

課税

月額料金	
1割	2割

リスクの高い踵部への対策

足元部分に幅狭の3層式縦長エアセルを採用。膝下をきめ細かく支え、踵部の圧力を解放。

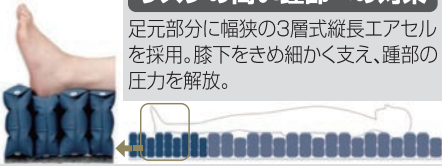

換気モード

マット内にエアを循環させ、熱と湿気をマット外に排出。ムレを防ぎ寝床内を快適に保ちます。




プレスエア⑧が換気効率を向上

車いす

1.車いすの種類

標準型<自走用・介助用>

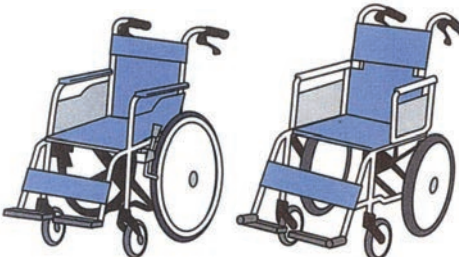


標準サイズでつくられた車いすです。ご本人が操作して駆動させる自走用と、介助者が押して駆動させる介助用があります。

モジュール型



部品の組み替えや、車輪、シートの位置などが調節できる車いすです。部品の一部が取り替え可能な簡易モジュール型と呼ばれる種類もあります。

リクライニング型

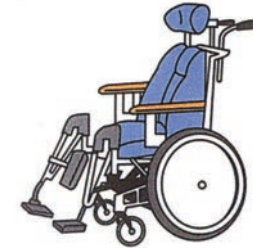


ティルト機能(座背角が一定のまま倒せる)やリクライニング機能(バックレストを倒せる)が基本です。レッグサポートの角度調節や頭部の位置調節など、姿勢保持機能を備えたものもあります。

電動型



電気で駆動する車いすです。自走用と介助用のほかに手動車いすに駆動ユニットを取り付けるものなど、さまざまな種類があります。

2.各部の名称と機能

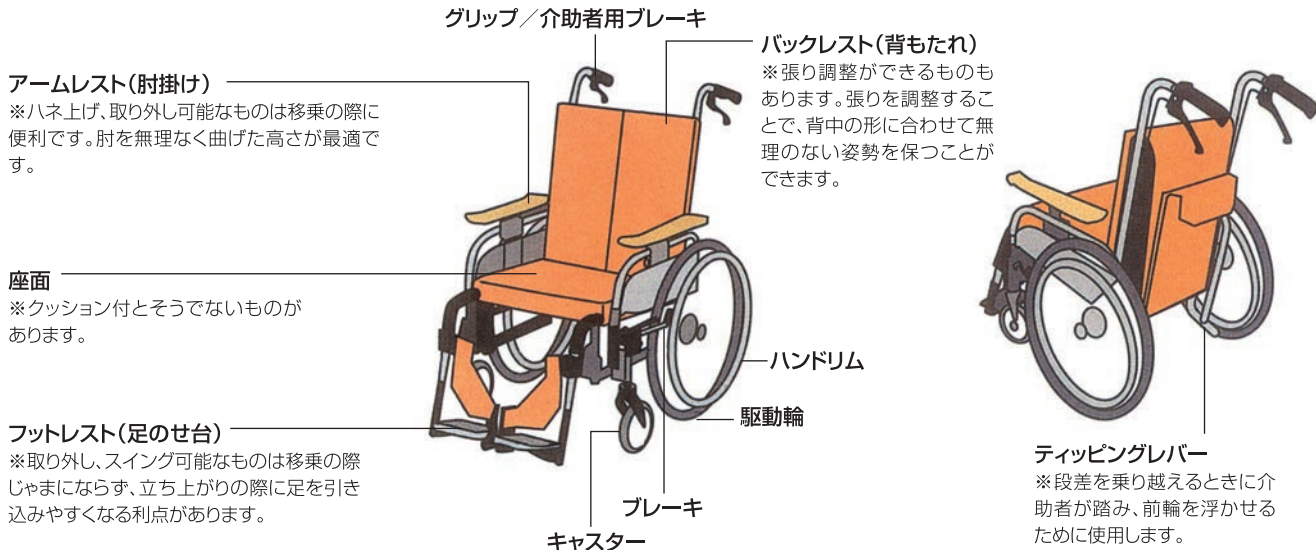

アームレスト(肘掛け)

※ハネ上げ、取り外し可能なものは移乗の際に便利です。肘を無理なく曲げた高さが最適です。

座面

※クッション付とそうでないものがあります。

フットレスト(足のせ台)

※取り外し、スイング可能なものは移乗の際に足が引っかかずに立ち上がりやすくなります。

グリップ/介助者用ブレーキ

バックレスト(背もたれ)
※張り調整ができるものがあります。張りを調整することで、背中の形に合わせて無理のない姿勢を保つことができます。

ハンドリム

駆動輪

ブレーキ

キャスター

ティッピングレバー

※段差を乗り越えるときに介助者が踏み、前輪を浮かせるために使用します。

3.取扱い方法

広げ方

- ブレーキをかけ、アームレストを持ち外側に少し開き、シートの両側に手を押して下に向かって押し広げる(指をはさまないように注意する)。

折りたたみ方

- フットレストを折たたみ、シートの中央を持ち上げて折りたたむ。

乗降時の注意

- 駐車ブレーキの確認→車いすが移動しないように。
- フットレストの折たたみ ※乗降時ステップ上に乗らないよう注意。

坂道、段差などでの注意(特に介護する方)

- 坂道や段差を下る際は、後向きで。
- 段差を昇る際は、介護者がティッピングレバーを利用して、力を有効に使う。
- 側溝のフタの隙間や踏切のレールの段差にキャスターが挟まることがないように注意。

4.車いすサイズ表記

